

„A-dec® 500”

kėdė ir instrumentų sistema

CONNECT TO
WHAT'S NEXT

with A-dec **500 Pro**

a[®]dec

IŠBANDYKITE „A-DEC 500“

Naujas požiūris, naujos galimybės.

Be viso to, ką jau įvertinote „A-dec 500“ odontologinėje kėdėje, dabar galima įsigyti naują instrumentų sistemą. „A-dec 500 Pro“ instrumentų sistema su „**A-dec+**“ atnaujinama programinės įrangos platforma užtikrina Jūsų odontologų komandai naują darnumo lygį.

IŠMANUS VALDYMAS Intuityvi, prie interneto prijungta įranga yra stabili ir nuspėjama.

RYŠYS Su programinės įrangos pagrindo platforma susieta „A-dec+“ suteikia Jūsų praktikai technologinio lankstumo.

LANKSTUS INTEGRAVIMAS Esamoje platformoje integruojant naujas klinikinės galimybes, įranga nepraranda savo vertės.

OPTIMALI PRIEIGA Visas reikalingas priemonės laikykite po ranka, patogiai pasiekiamoje vietoje.

NEPRIEKAIŠTINGA PRIEŽIŪRA Patogumas ir stabilumas padeda užtikrinti puikią paciento savijautą.





IŠMANUS VALDYMAS
„A-dec 500“ grupė



[01]

IŠBANDYKITE IŠMANŲ VALDYMA

*Nuspėjamas ir
intuityvus.*

Tai jausmas, kurį patiriate kaskart
pasitikdami naują pacientą, žinodami, kad
Jūsų įranga ne tik atnaujinta ir patikima,
bet ir labai intuityvi. Atrodo, kad ne Jūs
žengiate koja kojon su technologijomis,
o jos neatsilieka nuo Jūsų.

DINAMIŠKAS PAPRASTUMAS

Intuityvus dizainas.

„Dynamic Screen 7“ (DS7) 178 mm patvaraus stiklo ekranas su pažangiu interaktyviu paviršiumi ir supaprastinta sąsaja rodo tik tą informaciją, kurios Jums reikia atliekant procedūrą, kad visą dėmesį galėtumėte skirti pacientams.



DS7
GYDYTOJAS

IŠMANUS VALDYMAS
„A-dec 500“ grupė

PROGRAMUOJAMOS KĖDĖS PADĖTYS

Piktogramos rodo faktines kėdės padėtis, taigi galite drąsiai keisti pacientų padėtį.

JUTIKLINIS EKRANAS



Paprasta naršyti ekrane dėvint pirštines.

SLĖGIO REGULIAVIMAS

Ekrane galite tiksliai sureguliuoti tiekiamą slėgį antgaliams.

PROCEDŪRINIAI LAIKMAČIAI

Programuojami laikmačiai Jūsų klinikinėms procedūroms.

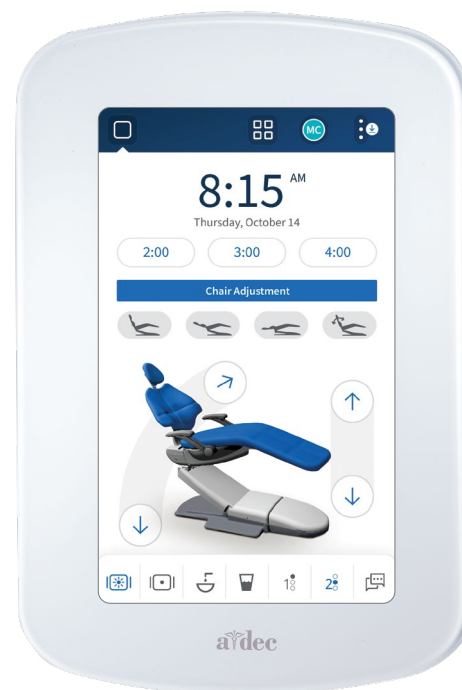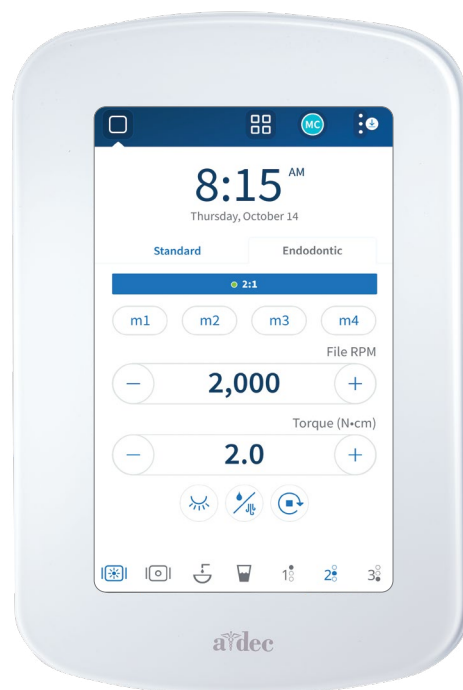

KALBŲ PASIRINKIMAS

Pasirinkite norimą meniu kalbą.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIAI

Technologijoms tampa išmanesnėms, programinės įrangos naujinimo pranešimai padeda nuolat atnaujinti Jūsų „A-dec“ įrangą.

PROGRAMUOJAMI PARAMETRAI

Atminties mygtukai leidžia vienu palietimu pasirinkti vieną iš keturių suprogramuotų parametrų.


SUŽINOKITE DAUGIAU



DAR DAUG KĄ GALIMA PAMATYTI

Technologijos nuolat tobulėja kaip ir mes. Sužinokite, ką galime pasiūlyti ir kas nauja.

SUSIETA IR PRIJUNGTA

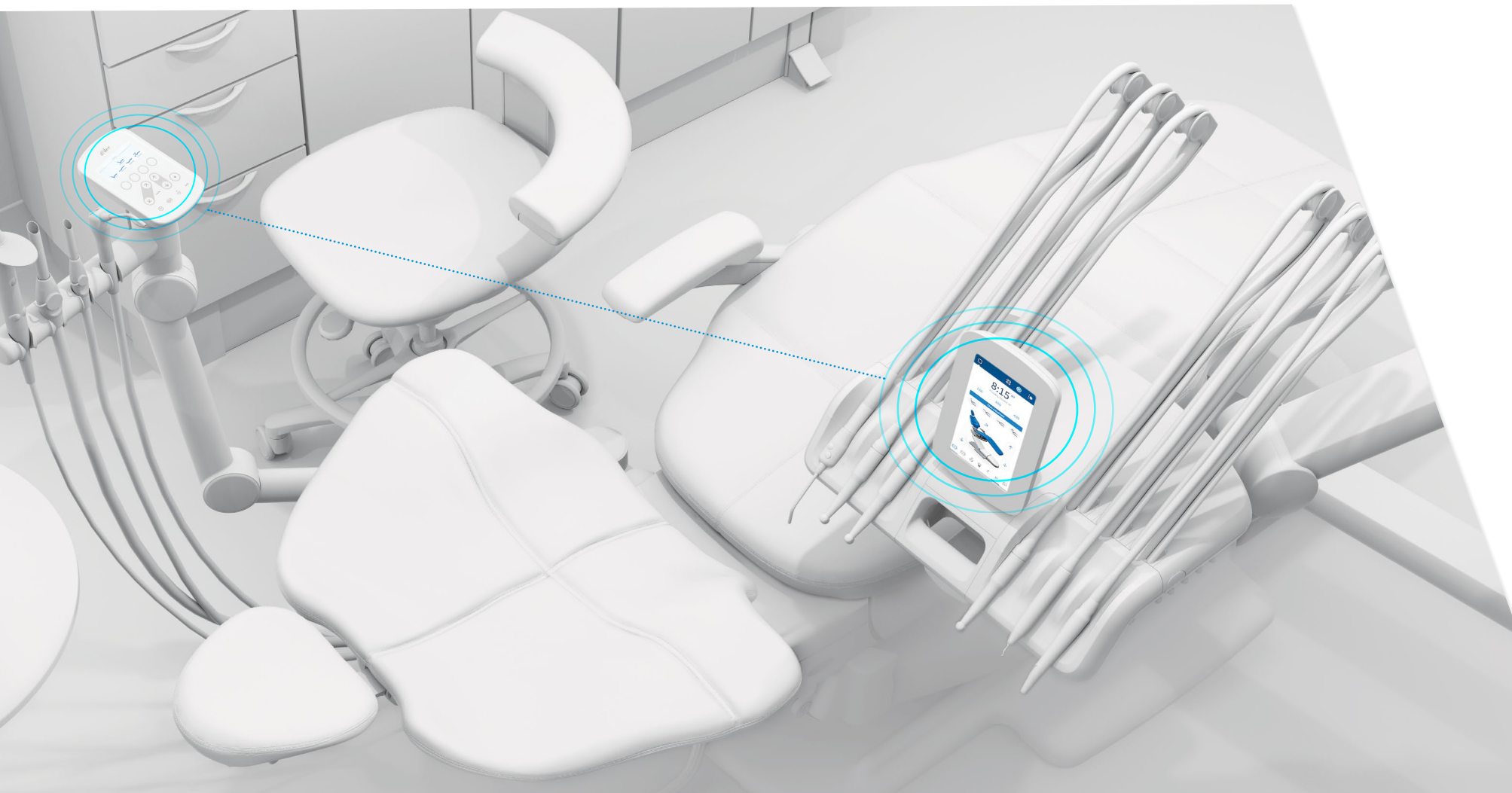

IŠMANUS VALDYMAS
„A-dec 500“ grupė

CP5 + DS7
ASISTENTAS GYDYTOJAS

Kalbate ta pačia kalba.

Juk pažįstate tokių kruopščių, įžvalgių asistentų, žinančių kitą Jūsų žingsnį? Susiejus gydytojo „Dynamic Screen 7“ (DS7) ir asistento valdymo pultelį (CP5) susiejama visa komanda.

REGULIUOJAMI PARAMETRAI

Nustatykite parametrus pagal savo darbo pobūdį.

KOMANDŲ PATVIRTINIMAS

Vaizdinis ir garsinis komandų patvirtinimas aktyviais įspėjimais ir atsakomaisiais signalais, patvirtinančiais Jūsų įvestis ir užklausas, suteikia pasitikėjimo dirbant.



CP5
ASISTENTAS

JUTIKLINIS EKRANAS

Pažangiais interaktyviaisiais mygtukais smūgiams atspariame stikliniame paviršiuje lengva programuoti, o tokį prietaisą paprasta dezinfekuoti.

LED INDIKATORIUS

Intuityvūs šviesiniai indikatoriai padeda naviguoti per nustatymus.





[02] IŠBANDYKITE RYŠĮ

Ateities dizainas.

Su programinės įrangos platforma susieta „A-dec+“ Jūsų praktikoje užtikrina lanksčias technologijų naudojimo galimybes.

Taigi Jūsų įranga išlieka aktuali, o Jūs – pasiruošę visiems ateities iššūkiams.

PRITAIKOMA ASMENINIAMS POREIKIAMS IR SINCHRONIZUOJAMA



Savo parametrus visada turėkite po ranka.

Paprastas, intuityvus ir galingas DS7 yra lengvai pritaikomas pagal jūsų poreikius – taip užtikrinamas sklandesnis ir efektyvesnis darbas visose susietose „A-dec“ darbo vietose.

KELIŲ NAUDOTOJŲ PARAMETRAI Darbo vietoje su prijungta „A-dec+“ kėdės padėties ir suprogramuoti antgalių parametrai įrašomi Jūsų naudotojo profilyje ir sinchronizuojami su kitomis darbo vietomis, kad galėtumėte pradėti dirbti nedelsdami.

PRANEŠIMŲ GAVIMAS IR SIUNTIMAS DS7 pranešimų funkcija užtikrina komunikaciją tarp darbo vietų netrukdamat procedūrą. Skubiu atveju galima parašyti pranešimą, kuris bus parodytas kito naudotojo ekrane.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIAI Užsiregistravus „A-dec+“ programėlėje, per programinės įrangos naujinius bus pasiekiamos naujos produktų savybės ir patobulinimai. Todėl galite atnaujinti įrangą vienu paspaudimu.



▲ Kelių naudotojų ekranas



▲ Pranešimų ekranas



LANKSTUS INTEGRVIMAS
„A-dec 500“ grupė

[03]

IŠBANDYKITE LANKSTAUS INTEGRAVIMO GALIMYBES



Paruošta viskam.

„A-dec“ gaminiai sukurti taip, kad būtų ilgaamžiai, o technologijos nuolat kinta. Galimybė integruoti naujas kliniškes galimybes esamoje platformoje reiškia, kad Jūsų įranga neatsiliks nuo Jūsų ir Jūsų ateities praktikos.

TIKSLŪS JUDESIAI



▲ Praplovimo ekrano įjungimas

▲ Greitai pasiekiami kėdės valdikliai

Pasinaudokite naujomis galimybėmis.

Kruopščiai dirbame siekdami užtikrinti, kad „A-dec 500 Pro“ instrumentų sistema būtų suderinama su dauguma klinikinių prietaisų. Dėl būsimų programinės įrangos atnaujinimų galėsite integruoti savo pasirinktus instrumentus nekeisdami įrangos. Taigi drąsiai pasinaudokite naujomis galimybėmis. Tai Jūsų pasirinkimas.

PROGRAMUOJAMI PRAPLOVIMO LAIKMAČIAI Keturios programuojamos parinktys padeda automatizuoti vandens sistemos praplovimą, kai nedirbama su pacientais. Tik patraukite visus antgalius nuo instrumentų sistemos ir įjungsite praplovimo ekraną, o tada pradėkite procesą paliesdami mygtuką.

PROGRAMUOJAMI ĮRANKIAI Vienu prisilietimu galima užprogramuoti ir išsaugoti pageidaujamus instrumento nustatymus.

DVIGUBO JUDESIO (RECIPROCATING) ENDODONTINIAI INSTRUMENTAI

Patogiai konfigūruojama sąsaja leidžia lengvai pasirinkti bendrąsias atkuriamąsias ir endodontijos funkcijas.

IŠDĖSTYMAS PAGAL JŪSŲ POREIKIUS Turėdami šešias skirtingiems instrumentams pritaikomas vietas, galite integruoti įvairių gamintojų klinikinius prietaisus.



▲ Dvigubo judesio (reciprocating) endodontiniai instrumentai



▲ Instrumentų aušinimo vandeniu indikatoriai





[04]

PAJUSKITE OPTIMALIĄ PRIEIGĄ

Tobulas artumas.

Visos reikalingos priemonės lengvai
išdėstomos ir patogiai pasiekiamos.
Dirbant šalia paciento, Jūsų laikysena
bus taisyklinga, vaizdas aiškus,
o priemonės – po ranka. Nuostabu,
kaip bėga laikas dirbant patogiai.

PAPRASTAS REGULIAVIMAS



Niekas neblaško dėmesio.

Tai tiesa. Galite įjungti, išjungti, paimiti ir grąžinti į vietą instrumentus nenukreipdami žvilgsnio nuo atliekamos procedūros ir net sąmoningai negalvodami. Daug dirbome kurdami paprastą ir nuspėjamą įrangą ir technologijas, kuriomis galima pasitikėti dirbant su pacientais.

FIRST-OUT LOGIKA Išėmus vieną antgalį, išmanusis valdiklis neleidžia veikti antrajam antgaliui, jei jis taip pat būtų aktyvinamas. Tai reiškia, kad asistentas gali uždėti grąžtą ant antrojo antgalio, o Jūs tuo metu visą dėmesį galite skirti pacientui.

REGULIUOJAMI ANTGALIŲ LAIKIKLIAI Kiekvienas „Traditional“ antgalių lizdas yra reguliuojamas, todėl naudojamus antgalius galite palenkti žemyn, kad būtų lengviau juos paimiti, o nenaudojamus – grąžinti į vertikalią padėtį, kad būtų saugiau.

TIKSLUS PADĖTIES NUSTATYMAS Lengvai ir tiksliai nustatykite instrumentų sistemos vietą ten, kur norite, ir ji tikrai ten išliks.

AUTOMATINIS STABDYMAS Paimkite už rankenos ir instrumentų alkūnės stabdys automatiškai atsilaivins. Mes tai vadiname jutikline aktyvacija, o Jums pakanka jausti, kaip be pastangų valdote instrumentų sistemą.

PERTEKLINIO VANDENS ŠALINIMAS Ši funkcija neleidžia paskutiniam vandens lašui nuo antgalio nukristi ant paciento.



PADĖTIES NUSTATYMAS BE KOMPROMISŲ

TOBULA GALVOS ATLOŠO PADĖTIS

Prieigos kampai gali lemti skirtumą tarp ilgos ir geros dienos. Galvos atrama reguliuojasi viena ranka paspaudus svirtį, todėl visada galėsite optimaliai matyti burnos ertmę.

PLONAS LANKSTUS ATLOŠAS

Ypač plonas „A-dec“ nugaros ir galvos atlošas leidžia patogiai dirbti kojas pakišus po pacientu, alkūnes laikant prie šono.





DAR ILGESNĖS INSTRUMENTŲ RANKOVĖS

Ilgesnės, lengvesnės instrumentų rankovės sumažina tempimą atgal ir mažiau vargina.

(Taikoma „A-dec Continental®“.)

PAPRASTAS JUTIKLINIO EKRANO PAKREIPIMAS

178 mm (7 col.) ekranas lengvai pakreipiamas, kad mažiau blizgėtų ir būtų geresnis matomumas.

NUIMAMI PADĖKLAI

Keičiamos padėties padėklų laikiklis leidžia pasirinkti patogią pasidėjimo vietą instrumentams. Optimaliai išnaudokite erdvę pasirinkdami mažą, standartinį arba didelį dydį.



NEPRIEKAIŠTINGA PRIEŽIŪRA
„A-dec 500” grupė



[05]

NEPRIEKAIŠTINGA PRIEŽIŪRA

*Gracinga, bet kartu
ir patogi.*

Švelniai veikianti ir komfortabili kėdė
leidžia Jūsų pacientams atsipalaiduoti
ir pasijausti saugiai. Ši maloni patirtis
išskirs Jūsų kliniką iš visų kitų.

STABILUS KOMFORTAS



NEPRIEKAIŠTINGA PRIEŽIŪRA
„A-dec 500“ grupė

Patogumas visam kūnui.

Patogumas – pojūtis ar mokslas? Ir viena, ir kita. Pagal žmogaus anatomiją suformuoti „A-dec 500“ apmušalai prisitaiko prie paciento kūno svorio ir tolygiai jį paskirsto. Jie tarsi „apglėbia“ pacientą, leidžia jam pasijusti patogiai ir atsipalaiduoti. O kai pacientas atsipalaidavęs, ramiau ir jums.

DVIGUBOS ARTIKULIACIJOS SLENKANTIS GALVOS ATLOŠAS Atkartoja natūralius paciento kaklo ir galvos judesius.

PLONAS NUGAROS ATLOŠAS Lankstus, bet tvirtas nugaros atlošas sukurtas tikslingai. Nugaros atlošo forma pritaikyta stabiliai apglėbti paciento nugarą ir pečius paliekant daugiau erdvės kojoms. Vadinasi, galite žemiau nuleisti pacientą ir pasislinkti arčiau burnos ertmės.

TVIRTI PORANKIAI Dviejų padėčių porankiai prilaiko pacientą, kai to reikia, ir pasitraukia iš kelio, kai yra nebereikalingi.

KOJŲ PAGRINDO PAKĖLIMAS Kai kėdė atsilošia, kojų zona nepastebimai pakyla iki 229 mm (9 col.) subtiliai sukuriant pojūtį, lyg pacientas būtų lopšyje. Dėl tokios padėties pacientas jaučiasi saugus ir atsipalaidavęs.



APGALVOTAS DIZAINAS

PATOGUMAS AKIMIRKSNIU

Ne pacientas turėtų rūpintis, kaip patogiau įsitaisyti kėdėje. O mes. Todėl suprojektavome kėdę taip, kad ji apglėbtų visą paciento kūną nuo pat įsėdimo momento.

ŠVELNUS JUDĖJIMAS / SUSTABDYMAS

Dėl preciziškai veikiančios hidraulinės pakėlimo sistemos paciento kėdė pradeda judėti ir sustoja ypač švelniai nekeliant pacientams nerimo staigiais judesiais ar sustabdymu. Taip pat kėdės judėjimas yra sinchronizuotas su natūraliu paciento judėjimu. Jam nereikia papildomai pasislinkti nuleidžiant arba pakeliant paciento kėdę.

LENGVA ĮSĖSTI IR IŠLIPTI

Tvirti dviejų padėčių porankiai yra patogi atrama pacientui įsėdant į paciento kėdę ir iš jos išlipant.

TINKAMAS PADĖTIES NUSTATYMAS

Keturi galvos atramos atlošo reguliavimo taškai užtikrina patogumą pacientui patogumą pakreipiant bet koku kampu.

GERESNIS MATOMUMAS

IPS (In-Plane Switching) ekrano technologija leidžia matyti daug aiškesnį vaizdą platesniais kampais. Net tada, kai ekranas optimaliai pritaikytas gydytojui, asistentas gali lengvai matyti ir stebėti iš šono.

SUBALANSUOTAS STABILUMAS

Antgalių alkūnės subalansuoja ir paskirsto rankovių svorį taip, kad galėtumėte lengvai ir patogiai dirbti su antgaliais be tempimo atgal ir nevarginant riešo.

LANKSČIOS RANKOVĖS

Ilgaamžės ir lengvas rankoves lengva valyti ir prižiūrėti.

TVIRTA KONSTRUKCIJA

Stabili konstrukcija sumažina vibracijas, kurias sukelia judantis pacientas, kad netrikdytų nei Jūsų, nei paciento.





Tinka įvairių dydžių pacientams



Maksimalus svoris iki 227 kg (500 svar.)



Kairiarankiams ir dešiniarankiams pritaikyta centre esanti instrumentų sistemos rankena ir jutiklinis ekranas

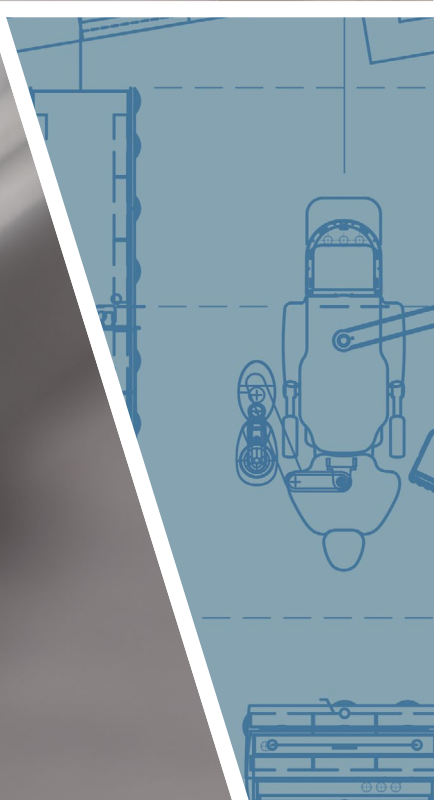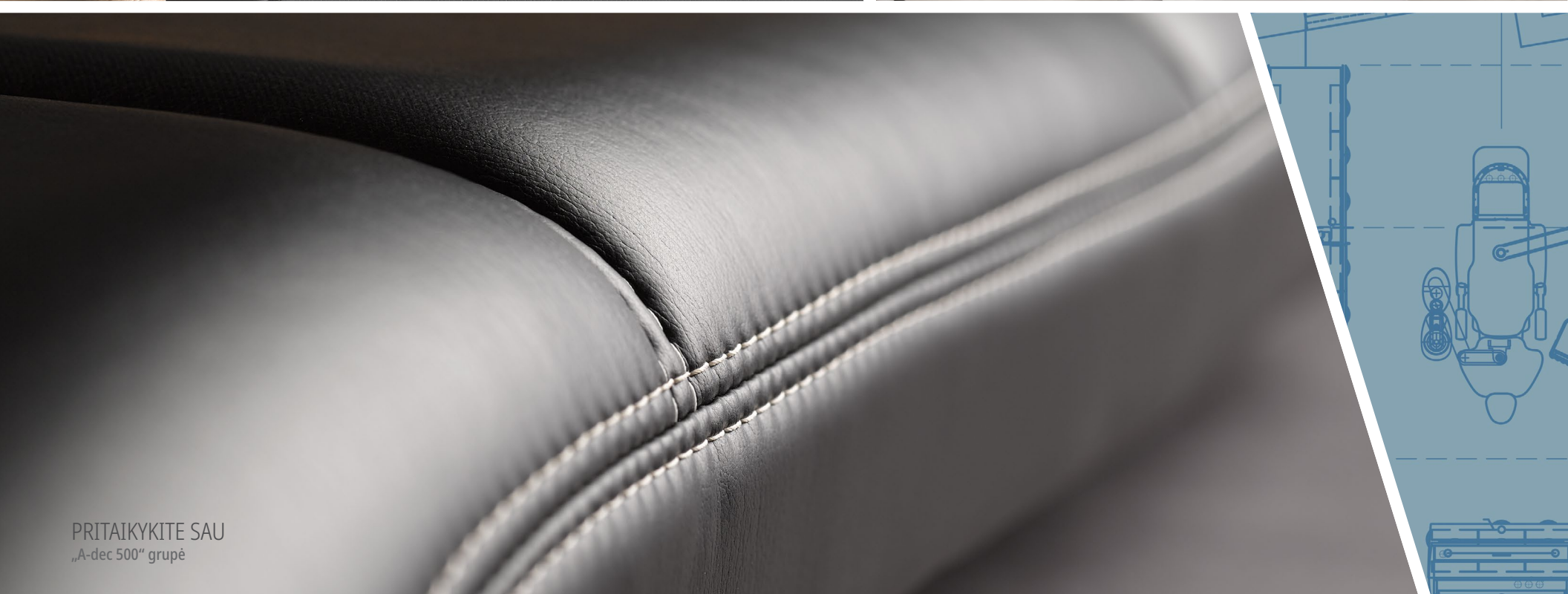

PRITAIKYKITE SAU
„A-dec 500“ grupė




[06]

PRITAIKYKITE SAU

Pritaikoma individualiai.

Spalva ir stilius, instrumentų sistemos variantai, kojiniai pedalai ir instrumentai. Jūs nusipelnėte dirbti taip, kaip norite, – iki pat paskutinio dygsnio. „A-dec“ vertina kiekvieno individualumą.

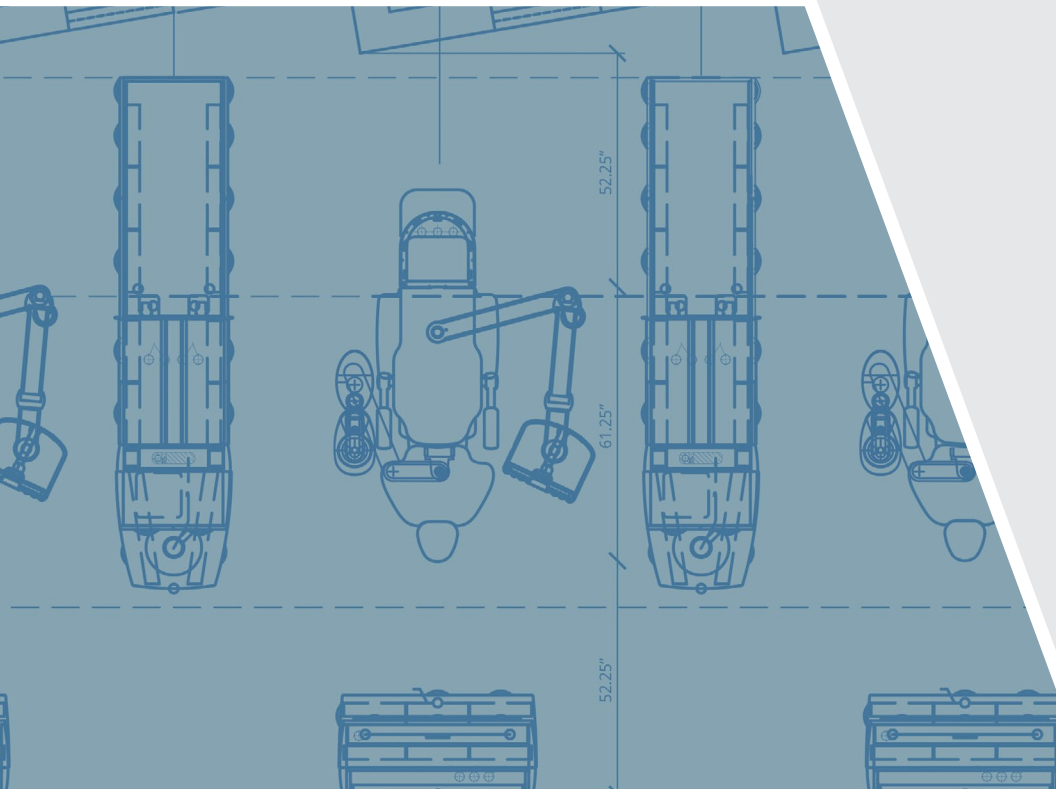

DIRBKITE, KAIP TIK NORITE

*Instrumentų sistemų
variantų pasirinkimas
pagal Jūsų praktikos
poreikius.*

Svarbu atsižvelgti į tris veiksnius: Jus, Jūsų komandą
ir Jūsų pacientus. „A-dec“ suteikia galimybę pasirinkti
tokią komplektaciją, kuri geriausiai atitiktų Jūsų
darbo pobūdį ir būtų patogi pacientams.

Argi ne to mes visi norime?



VISAPUSIŠKAI ERGONOMIŠKAS PATOGUMAS



„A-dec 533pro Continental“ instrumentų sistema, diskinis kojinis pedalas.



VISKAS PAPRASTAI INTEGRUOJAMA
„A-dec 532pro Traditional” instrumentų sistema.

NERIBOTAS LANKSTUMAS

▼ Jutiklinis pultelis „500 Deluxe Plus“

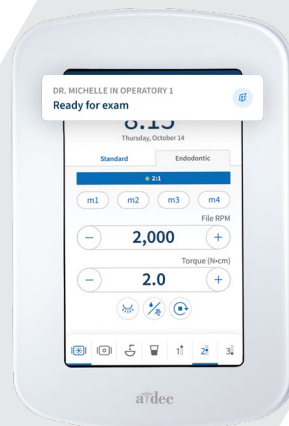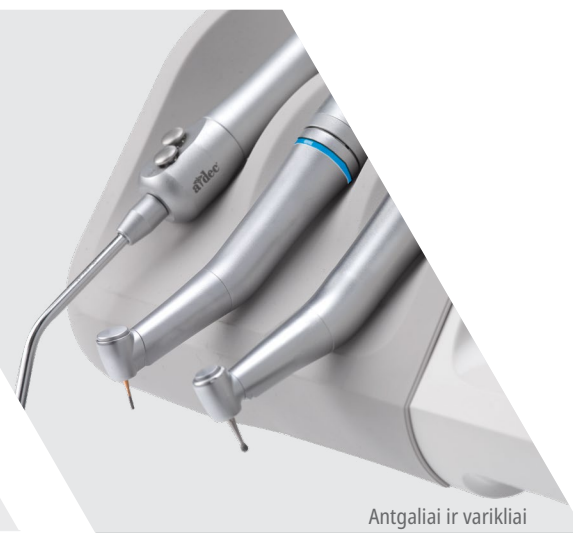

▲ 500 instrumentų sistemos

▲ 500 DS7 jutiklinis ekranas

▲ Integruoti instrumentai

PRITAIKYKITE SAU
„A-dec 500“ grupę

Mes vertiname galimybes rinktis.

Kadangi nėra dviejų visiškai vienodų gydytojų, mūsų įrangos variantai – tai galimybė Jums ir Jūsų komandai pasirinkti patį efektyviausią komplektą.

▼ Odontologinis šviestuvas



„12 o'clock“

▼ Monitoriaus laikiklis



▲ Spjaudyklė



Montuojama prie kėdės

▲ Kojiniai pedalai




Svirtinis kojinis pedalas



Diskinis kojinis pedalas

▲ Nuimamas padėklo laikiklis

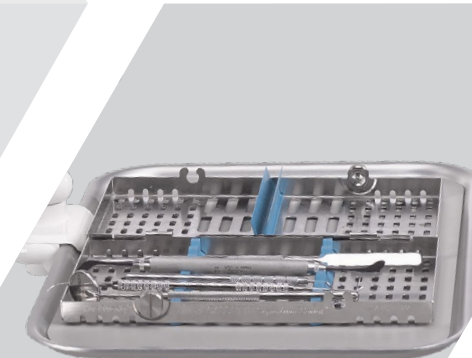

▲ Asistento instrumentų laikikliai

JŪSŲ SPALVA, JŪSŲ STILIUS




Siūti apmušalai




Suformuoti apmušalai

Siūtų apmušalų „Ultraleather®“ spalvos. Siūti apmušalai visada būna su kontrastingomis siūlėmis.

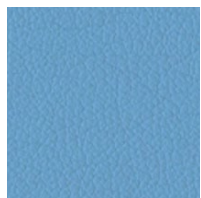


sky

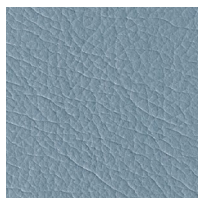

riviera




st. john

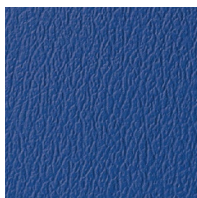

pacific



bayou

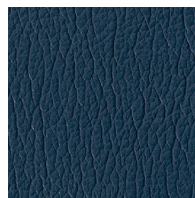


diplomat blue



cyan



parrot

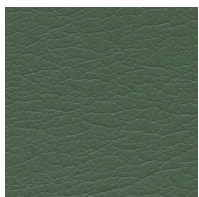


arugula



poseidon



lapis

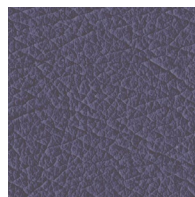


plum




sassy




apricot

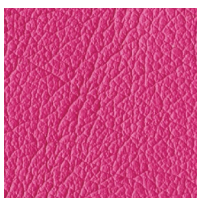

fuchsia

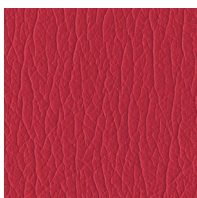

vivid punch

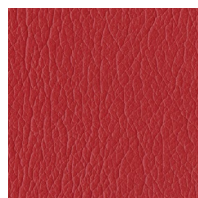


red



curry



almond

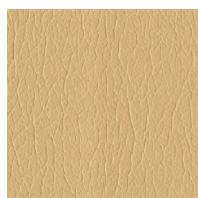

chamois



pecan



papyrus



sable



cave




arctic



timberwolf




granite

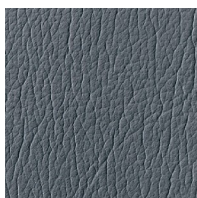

charcoal




schooner

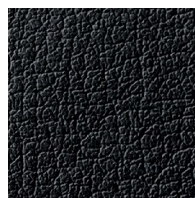

ebony

Suformuoti „Dauphine“ apmušalai

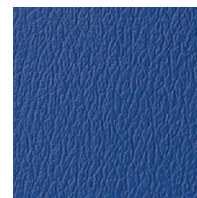

sky blue



indigo



sapphire



amethyst



lemongrass




hazelnut




driftwood



tawny

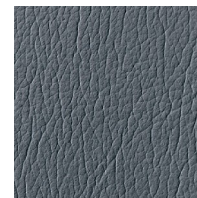

carbon

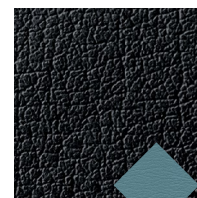

black



Išsirinkite savo tobulą spalvą ir paprašykite pavyzdžių. a-dec.com/colour



SPECIFIKACIJA IR TECHNINIAI DUOMENYS

Pagal šias kėdės, instrumentų sistemos ir asistento instrumentų laikiklio specifikacijas pasirinkite, kas geriausiai tinka Jums ir Jūsų komandai. Prireikus informacijos apie visus komplektavimo variantus, nuo LED šviestuvų iki monitoriaus laikiklio specifikacijų, kreipkitės į „A-dec“ atstovą arba žr. „A-dec“ įrangos katalogą.

„A-dec 511“ odontologinė kėdė	
Kėlimo aukščio intervalas	Žemiausias taškas: 343 mm (13,5 col.), Aukščiausias taškas: 800 mm (31,5 col.)
Atlošas	Itin plonas lankstus atlošas, 32 mm (1,25 col.)* (*su suformuotais apmušalais)
Galvos atlošas	Dvigubos artikuliacijos slankiojantis atlošas, atlaisvinamas fiksatoriumi
Porankiai	2 padėčių porankiai
Kėdės sukamasis įtaisas	60° (30° į abi puses nuo centro)
Maitinimo šaltinis	300 vatai
Kėdės valdymas	Gydytojo jutiklinis ekranas / asistento jutiklinis pultelis arba papildomai užsakomas kojinis pedalas
Pakėlimo sistema	Švelnaus paleidimo / sustabdymo hidraulinė pakėlimo sistema
Laikiklio stilius	„Radius®“ kairės / dešinės pusės
Apmušalų variantai	Siūti arba suformuoti
UL apkrovos įvertinimas	UL testuota su 227 kg (500 svar.) didžiausia paciento apkrova (apkrovos įvertinimas pagrįstas UL taikomu 4 kartų reikalavimu (907 kg (2 000 svar.) pagal statinį perkrovos testavimą)

Asistento instrumentai			
	„551sta“ asistento standartiniai	„541sta 12 O’Clock Duo“ standartiniai	„545sta 12 O’Clock“ asistento standartiniai
Oro / vandens švirkštas	Švirkštas papildomai užsakomas: šilto vandens švirkštas	Švirkštas papildomai užsakomas: šilto vandens švirkštas	Švirkštas papildomai užsakomas: šilto vandens švirkštas
Naudotojo sąsaja	CP5	CP5	CP5
Išsiurbimo instrumentai	1 seilių išsiurbimo antgalis (SA) 1 dulkių išsiurbimo antgalis (DA) papildomai užsakomas: antras DA	1 seilių išsiurbimo antgalis (SA) 1 dulkių išsiurbimo antgalis (DA) papildomai užsakomas: antras DA	1 seilių išsiurbimo antgalis (SA) 1 dulkių išsiurbimo antgalis (DA) papildomai užsakomas: antras DA
Vakuuminės žarnos	EasyFlex™	EasyFlex	EasyFlex
Padėties nustatymas	Horizontalusis reguliavimas papildomai užsakomas: Horizontalusis ir vertikalusis reguliavimas	Rankinis vertikalusis reguliavimas	Rankinis vertikalusis reguliavimas
Tvirtinimo vieta	Montuojama prie kėdės	Montuojama prie spintelės arba grindų	Montuojama prie spintelės arba grindų

Instrumentų sistemos

	500 Radius	
Modeliai	A-dec 532pro Traditional A-dec 533pro Continental	A-dec 532 Traditional A-dec 533 Continental
	Pro	Standartinis
„A-dec+“ ryšys	Taip	Ne
Atnaujinama programinė įranga	Taip	Ne
Keli naudotojai	Taip	Ne
Nuotolinė diagnostika	Taip	Ne
Pranešimų programėlė	Taip	Ne
Valdymo pultelis	DS7	Deluxe Plus
Laiko rodymas	Taip	Ne
Programuojamas antgalių praplovimo laikas	Taip	Ne
Perteklinio vandens šalinimas	Taip	Ne
Instrumentų šviesos šaltinis	Keturių įtampos parinkčių	Keturių įtampos parinkčių
Instrumentų padėtis	„Traditional“ ir „Continental“ – 5 + švirkštas	„Traditional“ ir „Continental“ – 5 + švirkštas
Alkūnės sistema	Greitas padėties nustatymas, subalansuota instrumentų alkūnė su pneumatiniu stabdžiu	Greitas padėties nustatymas, subalansuota instrumentų alkūnė su pneumatiniu stabdžiu
Tvirtinimo variantai	A-dec 511	A-dec 511
Pritaikoma kairiarankiams, dešiniarankiams	Taip	Taip
Integravimas	4,5 m (15 pėd.) USB 2.0 kabelis / iki 6 valdymo modulių papildomai užsakomas: Elektrinis USB šakotuvas	4,5 m (15 pėd.) USB 2.0 kabelis / iki 6 valdymo modulių papildomai užsakomas: Elektrinis USB šakotuvas

Reliable Creative Solutions

FOR DENTAL PROFESSIONALS WORLDWIDE



DAUGIAU NEI GARANTIJA. TAI ĮSIPAREIGOJIMAS.

„A-dec“ visų pirma siekia tobulinti odontologijos sektorių, o tai puikus klientų aptarnavimas ir nepriekaištingi odontologijos produktai. Jūsų „A-dec“ įrangai suteikiama dešimties metų garantija ir neribotas klientų aptarnavimo laikotarpis. Būsime čia šiandien, rytoj ir ateityje. Tai mūsų įsipareigojimas jums.

Išsamią informaciją, įskaitant išimtis, žr. a-dec.com/legal/warranty

Visos pavaizduotos spalvos ir produktai gali skirtis ir gali būti keičiami be įspėjimo. Dėl naujausios produkto informacijos kreipkitės į įgaliotąjį „A-dec“ atstovą. Visiems šiame dokumente esantiems prekių ženklams taikomos „A-dec“, jos susijusių įmonių ir jų kolektyvinių tiekėjų Jungtinėse Valstijose ir užsienio šalyse teisės į prekės ženklą.


©2025 A-dec Inc. Visos teisės saugomos. 85.1053.30/Eonly/02-25/RevA

A-dec⁺

Valdykite nuotoliniu būdu per
„A-dec⁺“ mobiliąją programėlę

Atsisiųskite „A-dec⁺“ programėlę iš
„App Store“ arba „Google Play“ ir
užregistruokite „A-dec“ įrangą naudodami
„Apple“ arba „Android“ įrenginį.

a-dec.com/plus

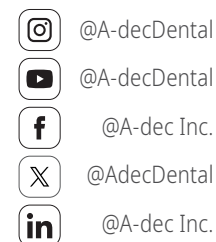

„A-dec“ būstinės

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132, JAV

Tel. 1.800.547.1883 JAV / Kanadoje

Tel. +1.503.538.7478 už JAV / Kanados ribų

a-dec.com

„A-dec“ Australija

Tel. 1.800.225.010 Australijoje

Tel. +61.(0)2.8332.4000 už Australijos ribų

„A-dec“ Jungtinė Karalystė

Tel. 0800.233285 Jungtinėje Karalystėje

Tel. +44.(0).24.7635.0901 už Jungtinės Karalystės ribų

